

NORA Aiu



beka DIFFERENT
BY DESIGN



Produktvideo
ansehen!



Entlasten Sie Ihre Pflegekräfte, aktivieren Sie Ihre Bewohner!

Die NORA Alu Aufstehhilfe gehört zu den gefragtesten Aktivierungsliftern auf dem Markt und wurde speziell für Menschen konzipiert, die noch die Fähigkeit besitzen kurzzeitig, unter Zuhilfenahme von Stützhilfen, zu stehen. Sie ist ideal um Bewohner, ohne Rückenbelastung des Pflegepersonals, sicher und bequem zu transportieren oder den Transfer zur Toilette zu erleichtern.

Außerdem bietet die NORA Alu die Möglichkeit den Bewohner gezielt wieder zu mobilisieren und den Bewegungsapparat und damit auch den Kreislauf zu stabilisieren und zu verbessern. Dies führt nachweislich zu einer höheren Lebensqualität Ihrer Bewohner. NORA Alu zeichnet sich durch hohe Qualität und zuverlässige Technik aus und ist ideal für den Einsatz in kleinen Räumen.



Flexible, höhenverstellbare Kniepolster mit Sicherheitsgurten, speziell anpassbar an kleinere Bewohner



Kabelfernbedienung mit Symbolen für alle Funktionen des Aktivlifters sowie Akkuladestatus



Zusätzliche Gurtaufnahmepunkte am Bügel



Kann problemlos für den Toilettengang und Abduschen des Gesäßbereiches verwendet werden



Ergonomische Handgriffe tragen zum guten Fahrgefühl für die Pflegekraft bei



Leicht zu fahrende Doppelrollen, davon zwei feststellbar für erhöhte Sicherheit beim Aufrichten

✓ Für kleinere Bewohner geeignet

Insbesondere Bewohner mit einer Körpergröße von bis zu 1,60 m haben bei Aktivliftern oftmals das Problem, dass sie beim Aufrichten in eine unangenehme und schmerzhaft Position gebracht werden. Durch Einhängen des Aufrichtgurtes an die speziell für kleinere Bewohner angebrachten Aufnahmepunkte, umgeht man die schmerzhaft Druckausübung im Rücken und Achselbereich.

✓ Bequeme, höhenverstellbare & flexible Kniepolster

Die ergonomisch geformten Kniepolster sind einzeln gelagert und können individuell an jeden Bewohner höhenverstellbar angepasst werden. So kann einem schmerzhaften Druck auf der Kniescheibe beim Aufricht-Vorgang effektiv vorgebeugt werden.

✓ Leicht zu manövrieren

Durch die leichte Bauweise der NORA Alu lässt sich der Aktivlifter ganz einfach bewegen. Die Mobilitätshilfe kann bequem von nur einer Pflegekraft bedient werden und beugt durch das smarte Ergonomiekonzept Rückenverletzungen und Fehlbelastungen von Pflegekräften vor.

✓ Hochwertige Aluminium-Konstruktion

Die Verwendung von hochwertigen Aluminium Komponenten ermöglicht die leichte Bauweise der NORA Alu.




Technische Daten

Gesamtlänge	1.027 mm
Breite außen bei geschlossenem Fahrgestell	700 mm
Breite innen bei gespreiztem Fahrgestell	897 mm
Gewicht	ca. 51 kg
Höhe (min. / max.)	1.168 mm / 1.781 mm
SWL	200 kg
Akku	24 V

Produkteigenschaften

Elektrisch spreizbares Fahrgestell
Leichtbauweise aus Aluminium
Zusätzliche Gurtaufnahmepunkte zum Aufrichten von Bewohnern bis 1,60 m Größe
Flexible, höhenverstellbare Kniepolster mit Sicherheitsgurten
Notablassfunktion
Geschlossene Doppelrollen
Ergonomische Handgriffe
Kabelfernbedienung mit Symbolen zu allen Funktionen und Anzeige des Akkuladestatus

Verfügbare Optionen

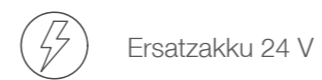

Ersatzakku 24 V



Wandladegerät

Aufrichtgurte



Aufrichtgurt NORA mit Clip

Armpolster und Rückenteil mit Anti-Rutschbeschichtung
 Doppelte Sicherheitsgurte für Brustbereich
 Zusätzlich gepolsterter Brustgurt



BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de